



REVYLINE RL 640

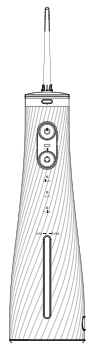

Портативный ирригатор для полости рта

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабель USB Type-C

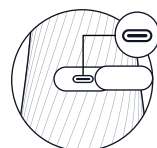

Разъем зарядки

Насадка

Кнопка блокировки насадки

Кнопка вкл/выкл



Кнопка выбора режимов

Индикаторы режимов работы и уровня заряда

Уровень воды

Резервуар

Разборная конструкция

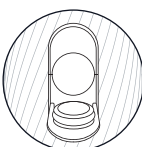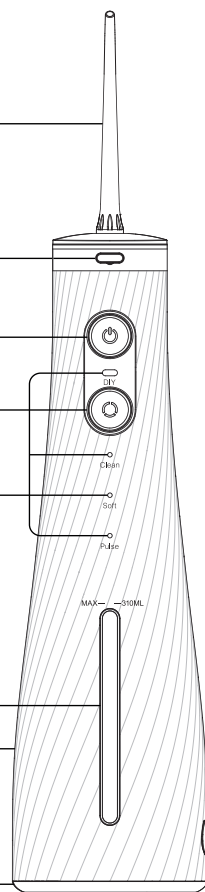

Отверстие для заливки воды

Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора RL 640 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намочения кабеля.
2. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.
8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Предупреждения медицинского характера

- Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются

более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

- Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.
- Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

Зарядка аккумулятора



Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект.



Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью.



Во время зарядки аккумулятора индикаторы прибора мигают. Когда зарядка завершена, одновременно горят все четыре индикатора.



Прибор требует подзарядки, если происходит мигание индикаторов.



Если вы длительное время не пользовались прибором, процесс зарядки может начаться не сразу, а спустя несколько минут. Это нормально.





Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов в зависимости от источника питания.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации портативного ирригатора RL 640 3 сменные насадки в пенале:

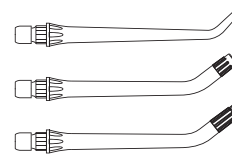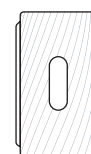

Стандартная насадка

Пародонтальная насадка


Ортодонтическая насадка

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.


Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

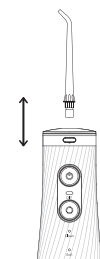

Разборная конструкция ирригатора

Блок ирригатора RL 640 является разборным. Его нижняя часть отсоединяется от основного блока с помощью кнопки, расположенной на задней части корпуса у основания прибора. Такой конструктив помогает производить внутреннюю очистку прибора от известкового налета, который может образовываться из-за жесткости воды в процессе длительной эксплуатации ирригатора.


Внимание! Не разбирайте ирригатор с целью наполнения резервуара водой. Воду для проведения процедуры ирригации наливают в резервуар через специальное боковое отверстие.

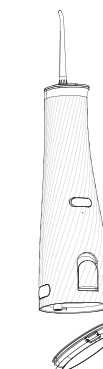

Наполнение резервуара

Наполнять резервуар можно через боковое отверстие. Для этого откройте заглушку резервуара и налейте чистую воду. Закройте заглушку.

Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

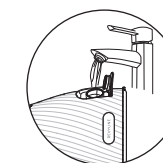

Включение и выключение прибора


- Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания вкл/выкл.
- Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку вкл/выкл.


Выбор режима работы





Осуществляется нажатием кнопки выбора режимов, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

Портативный ирригатор RL 640 позволяет использовать 4 режима работы:

 **DIY** Настраиваемый режим, в котором с помощью длительного нажатия кнопки выбора режимов можно самостоятельно менять уровень давления. Всего уровней давления жидкости семь.

 **CLEAN** Ежедневный уход. Эффективная чистка боковых поверхностей и межзубных промежутков.

 **SOFT** Подходит для начинающих пользователей и людей с повышенной чувствительностью зубов.


 **PULSE** Чередование слабого и сильного напора водной струи для гидромассажа десен.

После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

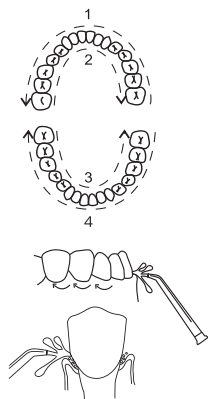

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

! Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!

Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его

деталях и возникновения неприятного запаха.

Использование ополаскивателей и растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

Внимание! В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

Уход и обслуживание

Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Распространенные проблемы и их решение

Не извлекается насадка

Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

Сложности выбора уровня напора струи

Решение: После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

Кровоточивость во время ирригации

Решение: Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии с поверхности десен. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

Как предотвратить разбрызгивание воды?

Решение: Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE Модель: RL 640

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

4 режима работы – DIY, Clean, Soft, Pulse

Емкость резервуара – 310 мл

Уровень давления жидкости – 345–1035 кПа

Частота пульсации – 1600 в мин.

Литиево-ионный аккумулятор – 1500 mAh

Время полной зарядки – 3 ч.

Уровень влагозащиты – IPX7

Материал корпуса – ABS

Потребляемая мощность – 5 Вт

Гарантия – 2 года

Средний срок службы – 5 лет

Хранить при комнатной температуре

Комплектация

Основной блок ирригатора

3 сменные насадки в пенале

Дорожная сумка

Кабель USB Type-C

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

☎ 8 (800) 775-38-49

🌐 www.revyline.ru